

Vielen Dank, dass Sie sich für das OSITO REFLEXOTHERAPY DEVICE entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und lernen Sie, wie Sie mit dem Gerät richtig umgehen, bevor Sie es verwenden. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

EINFÜHRUNG

- Das zentrale Merkmal dieses Infrarotgeräts ist das Reflextherapiesystem.
- Die Reflextherapie basiert auf der Emission einer Reihe kleiner elektrischer Impulse, die zur Aktivierung des Kreislaufs beitragen. Es gibt keine nachteiligen Auswirkungen und es ist absolut sicher.
- Dieses Gerät wurde mit Infrarotstrahlung entwickelt, die auf moderner Wissenschaft und traditioneller chinesischer Medizin basiert. Es verfügt über Hochfrequenz, Magnetismus und Wärmebehandlung.
- Es verfügt über 25 verschiedene Programme für die verschiedenen Körperteile. Auf alle Funktionen kann mit der Fernbedienung zugegriffen werden.
- Darüber hinaus kann die Behandlung mithilfe der Elektroden verbessert werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Das Produkt sollte wie in diesem Handbuch beschrieben ordnungsgemäß verwendet werden, um physische und materielle Schäden zu vermeiden.

VERWENDEN

- Verwenden Sie das Gerät niemals an feuchten oder extrem staubigen Orten, da dies zu einem mechanischen Versagen führen kann.
- Stellen Sie das Gerät niemals Wärmequellen oder Sonnenlicht auf.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Schlaf oder beim Schlafen.

NICHT FÜR FOLGENDE KUNDEN GEEIGNET

Sie sollten Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie das Reflextherapiegerät verwenden, wenn:

- Du bist schwanger.
- Du hast Fieber.
- Der Arzt hat Ihnen empfohlen, sich auszuruhen, oder Sie fühlen sich nicht gut.
- Sie erholen sich auf Anordnung des Arztes.
- Sie leiden an einer chronischen Krankheit oder Krebs.
- Sie haben zerebrale Läsionen (Blutgerinnsel, Schnittwunden, Traumatismus usw.)
- Sie erholen sich von einer Operation im oberen Teil Ihres Körpers. Gesäß, Oberschenkel oder Waden.
- Sie leiden an einer Herzerkrankung, Herzproblemen oder verwenden ein elektronisches medizinisches Gerät.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher verwenden.
- Sie sind verletzt oder haben eine Hautkrankheit.
- Sie haben gebrochene oder missgebildete Knochen.
- Dieses Gerät ist nicht für Kinder, Behinderte oder Invaliden geeignet.
- Die Verwendung derselben wird für Menschen mit psychischen Problemen nicht empfohlen.

WÄHREND DES GEBRAUCHS

- Stellen Sie das Reflextherapiegerät auf eine ebene Fläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen therapeutischen Geräten oder elektrischen medizinischen Geräten und Ähnlichem.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, da Sie das Gerät beschädigen oder beschädigen könnten.
- Bitte nehmen Sie keine Flüssigkeiten auf, wenn Sie das Gerät verwenden, um zu vermeiden, dass diese auf das Gerät gelangen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Körperteilen, da dies zu einem mechanischen Versagen oder sogar zu einem elektrischen Schlag führen kann.

- Ihr Körper sollte während der Behandlung entspannt sein.

- **Verwenden Sie das Gerät nicht unmittelbar nach den Mahlzeiten.**

Warten Sie mindestens 1 Stunde.

- **Der tägliche Gebrauch sollte auf maximal 25 Minuten begrenzt sein.**

DIE VERWENDUNG DER ELEKTRODEN

- Die Verwendung der Elektroden ist nur an Armen, Beinen, Bauch und Rücken gestattet. Der Rest des Körpers sollte mit Reflextherapie behandelt werden.

- Nehmen Sie nicht zwei Elektroden gleichzeitig auf.

- Setzen Sie den Protektor nach jedem Gebrauch wieder in das Gel ein, um sicherzustellen, dass Elektrode funktioniert gut.

- Halten Sie das Elektrodengel sauber, fern von hohen Temperaturen und Sonnenlicht.

- Wenn das Elektrodengel aufgrund von Schmutz nicht klebrig genug ist, reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch oder kaufen Sie neue, indem Sie sich an den technischen Kundendienst wenden.

- Verwenden Sie keine chemischen Produkte zum Reinigen der Elektroden.

DAS GERÄT DARF IN DEN FOLGENDEN BEDINGUNGEN NICHT VERWENDET

WERDEN:

- Wenn es ins Wasser gefallen ist: Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten gestellt werden oder mit diesen in Kontakt kommen.

- Wenn Sie sich bei der Verwendung des Geräts seltsam oder äußerst unwohl fühlen, schalten Sie es sofort aus und rufen Sie Ihren Arzt an.

- Während eines Gewitters.

- Wenn Sie einen beschädigten oder nicht funktionierenden Stecker oder ein defektes Kabel haben

WENN DAS GERÄT NICHT VERWENDET WIRD

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem Gebrauch ausgeschaltet ist.

- Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch und vor dem Betrieb vom Stromnetz Reinigung.

- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort.


RICHTIGE VERWENDUNG DES STECKERS

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem Gebrauch ausgeschaltet ist.

- Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch und vor dem Betrieb vom Stromnetz Reinigung.

- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort.

Aufbau des Gerätes

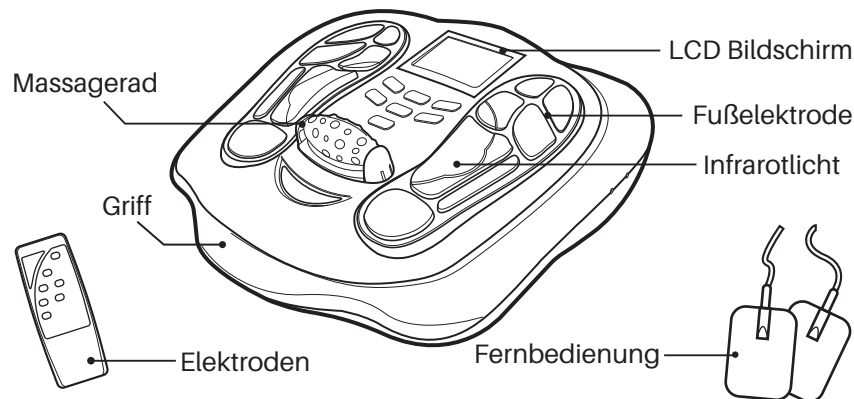

BETRIEBSANLEITUNG

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und schließen Sie es an.
2. Stellen Sie Ihre nackten Füße auf das Gerät. Beide Füße sollten in Position sein, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
3. Drücken Sie die EIN / AUS-Taste einige Sekunden lang, und der LCD-Bildschirm leuchtet auf.
4. Drücken Sie die MODE-Taste und wählen Sie das gewünschte Programm aus den 25 verfügbaren aus.
5. Drücken Sie ▲ SOLE / BODY um die Intensität der Impulse zu erhöhen, und ▼ SOLE / BODY um die Intensität derselben zu verringern.
6. Sie können das Programm auswählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Das Ändern des Programms während des Betriebs des Geräts wird nicht empfohlen. In diesem Fall wird die Intensität auf Stufe 0 verschoben, damit Sie sie nach Ihren Wünschen einstellen können.
7. Wenn Sie die EIN / AUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird das Gerät sofort ausgeschaltet.

WARNUNG: Erhöhen Sie die Intensität des Geräts allmählich, bis Sie die Impulse spüren. Die angemessene Intensität hängt von der Empfindlichkeit jedes Einzelnen ab. Es ist wichtig, dass Ihre Füße nackt sind (keine Socken).

• Reflextherapieprogramme

Die folgende Tabelle zeigt die 25 Programme, die das Gerät bietet. Diese Programme mildern lediglich die beschriebenen Probleme und helfen ihnen.

Eine Unterbrechung eines Programms nach der Hälfte der Behandlung ist nicht ratsam, um eine größere Wirkung zu


Beschreibung der Betriebsarten

Modus	Type	Entsprechende Symptome
1. Akupunktur schieben	TENS	Hoher Blutdruck
2. Akupunktur	TENS	Kopfschmerzen
3. Akupunktur kneten	TENS	Abnormale Menstruation
4. Akupunktur-Klopfen	TENS	Lumbale Belastung
5. Verschrottung	TENS	Müde Füße
6. Drücken	EMS	Ischias
7. Massage	EMS	Immunsystem
8. Massage schieben	EMS	Hexenschuss
9. Drücken drücken	TENS	Muskelentspannung
10. Akupunktur Quetschen	TENS	Muskelaktivierung
11. Akupunktur hämmern	TENS	Nackenschmerzen
12. Kneten	EMS	Schmerzen in der Brust
13. Pochen	TENS	Apoplexie
14. Verschrotten Drücken	TENS	Verstopfung
15. Schröpfen	EMS	Bauchschmerzen
16. Körperformung	EMS	Gewichtsverlust
17. Hämmern	EMS	Schlaflosigkeit
18. Massageklopfen	TENS	Müdigkeit
19. Schieben	EMS	Schmerzen in den Wirbeln
20. Rollendes Stampfen	EMS	Neurasthenie
21. Drücken	EMS	Osteoporose
22. Schüren	TENS	Zervikale Spondylose
23. Akupunktur-Massage	TENS	Arthritis / Rheuma
24. Shiatsu	TENS	Durchblutung
25. Rollendes Kneten	EMS	Druck

• **Karte des Fußes in Bezug auf körperliche Beschwerden.**

Reflextherapie ist eine Wissenschaft, die sich mit einem der empfindlichsten Teile des menschlichen Körpers befasst - den Füßen. Es besteht aus der Aktivierung bestimmter Bereiche, die über die Fußsohle eine Verbindung zu menschlichen Organen herstellen.

Das folgende Diagramm zeigt die Beziehung zwischen den Füßen und körperlichen Beschwerden.

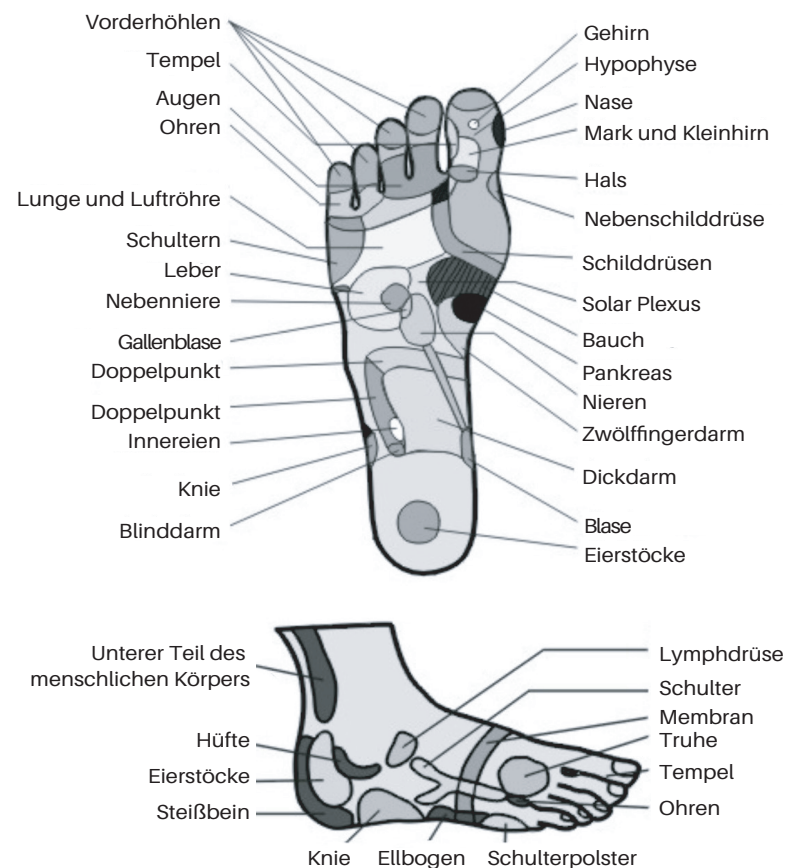

Die Verwendung von Elektroden

Das Reflexotherapie-Gerät wird mit Gelelektroden geliefert, um die Muskeln zu aktivieren oder zu entspannen. Die Muskelstimulation unter Verwendung von Elektroden ist eine Technik, die verwendet wird, um die Muskeldefinition zu straffen, umzugestalten, zu bestätigen und aufrechtzuerhalten.

1. Schließen Sie die Elektroden an das Hauptgerät an.
2. Platzieren Sie die Elektroden auf dem Bereich, den Sie behandeln möchten (Arme, Beine, Bauch oder Rücken).
3. Wählen Sie das Programm für Ihren Zweck aus: Programm 9 (Muskelentspannung) oder Programm 10 (Muskelaktivierung).
4. Erhöhen Sie die Intensität allmählich, bis Sie die Impulse spüren (die Intensität kann je nach Empfindlichkeit des Einzelnen variieren).

NB.:

- Verwenden Sie die Elektroden nicht gleichzeitig mit den Reflextherapieprogrammen.
- Die Verwendung dieser Elektroden ist nur an Armen, Beinen, Bauch und Rücken gestattet.



Der Rest des Körpers sollte zu einem anderen Zeitpunkt mit Reflextherapie behandelt werden, indem Sie Ihre Füße barfuß auf das Gerät legen.

- Platzieren Sie die Elektroden nicht an beschädigten Stellen oder Muskeln.

Pads Therapie Nutzung, Beispiel



Schulter und Rücken

Symptome (Schulter, Rücken muskulös Schmerzen und so weiter) Cutline

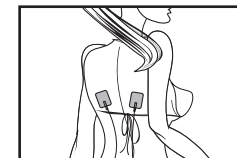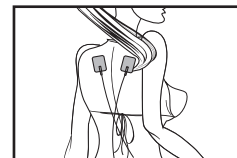



Taille

Symptome (Taille muskulös Schmerzen und so weiter) Cutline

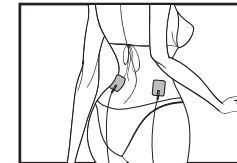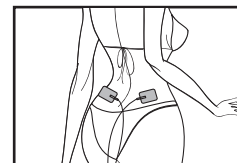



Arme

Symptome (Tauben arm, Muskelschmerzen und so weiter) Cutline

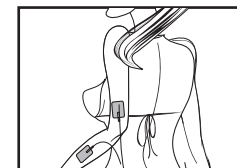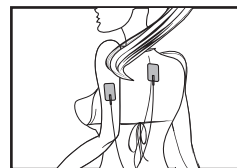

Beine

Symptome (Bein Muskelschmerzen und so weiter) Cutline

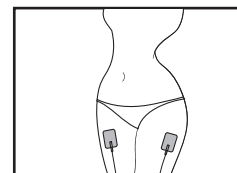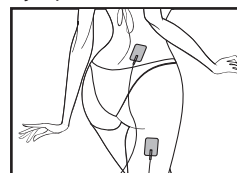

Hinweis: Wenn Sie Ersatzteile für dieses Zubehör kaufen müssen, wenden Sie sich an den offiziellen Kundendienst.

INSTANDHALTUNG








- Bitte ziehen Sie das Kabel nach Gebrauch vom Stecker ab.
- Überprüfen Sie vor der Reinigung, ob das Gerät nicht angeschlossen ist.
- Ölflecken sollten mit einem Tuch und Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Reinigen Sie den Schalter und die Fernbedienung nicht mit einem feuchten Tuch, da dies zu irreversiblen mechanischen Fehlern führen kann.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Bürsten oder harten Materialien, die diese beschädigen könnten.








TIPPS

- Um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, sollte der Benutzer beide nackten Füße ohne Socken an der Basis des Geräts auf und ab gehen. sonst wird es nicht funktionieren.
- Wenn Ihr Gerät nach dem Einschalten nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob es richtig angeschlossen ist, überprüfen Sie das Kabel, das das Gerät mit dem Stecker verbindet, und schalten Sie das Gerät wieder ein und aus.
- Wenn es plötzlich stoppt, überprüfen Sie, ob die Zeit nicht abgelaufen ist, und starten Sie das System neu Reflextherapiegerät.
- Verwenden Sie das Reflextherapiegerät nicht länger als 25 Minuten pro Tag.
- Die Verwendung von Elektroden soll die Muskeln von Armen, Beinen, Rücken und Bauch aktivieren. Verwenden Sie sie nicht an anderen Stellen des Körpers, die nicht in diesem Handbuch angegeben sind. Es gibt spezielle Programme für die Behandlung des restlichen Körpers mittels Reflextherapie (Platzierung der nackten Füße auf dem Gerät).

Technische Spezifikationen

Erläuterung der Zahlen, Symbole, Warnhinweise und Abkürzungen, die auf der Ausrüstung

1		(Symbol für "BATCH CODE". Dieses Symbol sollte mit Produktion/Charge Nr. und neben Grafik, Batch Code und Los Nummer und die Chargennummer usw.) Beispiele: 
2		(Symbol für "HERSTELLUNGSDATUM". Dieses Symbol sollte nächste Nummer) In der Produktion von medizinischen Geräten (benutzen Sie die Markierung  vor dem Produktionsdatum)
3		Symbol für "Achtung, Begleitdokumentation beachten"
4		Nach der Annahme der CE- Zertifizierung, CE-Markierung ist, wie folgt, gezeichnet. Die vertikale Höhe darf nicht kleiner als 5 mm sein, die deutlich sichtbar, klar, langlebig, die CE-Konformitätsbewertungsverfahren werden durch eine benannte Stelle, die Benannte Stelle Registriernummer der Seite des CE-Zeichen werden sollte (in der Regel unten rechts). Der Durchmesser der CE- Kennzeichnung nicht kleiner sein sollte als die 5 mm Halbkreis der beiden ausmacht, das XXXX in der unteren rechten Ecke ist die Benannte Stelle Identifikationsnummer, wie der Seine-0413. Alle medizinischen Produkte auf dem EU-Markt verkauft werden, müssen Sie die "Rechenelement" "CE". Befestigen Sie das CE-Zeichen zeigt an, dass: A. Die Geräte die grundlegenden Anforderungen der MDD zu erfüllen; B. Die Anlagen in der EU legal auf dem Markt verkauft werden. C. Das Gerät hat die Verfahren zur Konformitätsbewertung bestanden. Das CE- Zeichen anzubringen, um die medizinischen Geräte haben zwei Typen. Das ist, CE-Zeichen ohne Benannte Stelle Identifikationsnummer und die CE-Kennzeichnung mit der benannten Stelle die Kennnummer.
5		Das Symbol für den Hersteller (die "Hersteller"- Tag), dem Tag der Firma Name und Anschrift des Herstellers enthalten sollte. Produkthersteller, CE stehen der Name und die Adresse der Importeure und/oder Händler.

6		Symbol für "Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft" ("EU Bevollmächtigter" Tag), der Tag sollte die Firma Name und Anschrift des Unternehmens, die von der Europäischen Union zugelassen.
7		Die Abfälle sollten rechtlich gehandhabt werden.
8		BF-Geräte
9	 THIS SIDE UP	Oberseite
10	 FRAGILE	Zerbrechlich
11	 KEEP DRY	Trocken halten
12		Stapeln
13	SN	Geräte Seriennummer
14	IP21	Geschützt vor Berührung durch Finger und Gegenstände, die größer als 12 Millimeter sind, und geschützt vor Wassersprühnebel, der weniger als 15 Grad von der Vertikalen entfernt ist

Lagerung / Wartung

1. Feuchten Tuch oder neutrales Reinigungsmittel verwenden, um die Maschine zu löschen, und nicht flüchtige Flüssigkeit verwenden Sie die Maschine, wie Benzol, Verdünner oder Benzin.
2. Halten Sie es von Magnetfeld- und Reichweite von Kindern.
3. Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder mit Wasser.
4. Wenn die Pads nicht ausreichend Klebstoff oder verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch oder Änderung für die Neue. Nicht die Pads mit chemischen Produkten reinigen.
5. Bitte nicht Mantel, Reparatur der Maschine selbst, oder Hersteller nicht die Instandsetzung und Kundendienst Garantie aufzubauen oder.
6. Wenn für längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung entfernen .

Umweltschutz

Bitte geben Sie einen Abfall Klassifizierung nach Gebrauch, wie Pads, Karton und so weiter.

Spezifikationen

Modell Artikelnummer: AST-300D

Dieses Gerät gehört zur Klasse des Typs BF II gemäß Ziffer 5.



Shenzhen OSTO Technology Company Limited
No.43, Longfeng road, Xinsheng community,
Longgang street, Longgang district,
Shenzhen city, Guangdong Province, China



Wellkang Ltd.
SuiteB, 29 Harley Street, London, W1G 9QR, England, Vereinigtes Königreich

Nennspannung: 5 V DC, 1000 mA

Durch Adapter mit Strom versorgt: WT 0502400

Nennspannung: 240 V

Nennleistung: 0,1 A

Ausgabe Wellenform: Rechteckwelle

Puls Wiederholung Frequenzen: 10-100 Hz

Maximale Amplitude der Ausgangsspannung: 72V

Software Version Nr.: MC 0188 F-REV-V1.0

Nennfrequenz: 60 Hz

Nennleistung: 5V, 1000 mA

Impulsdauer: 115 µs

Wirkung von Lastimpedanz: 1KΩ

Betriebszustand:

10-40°C

30 % RH ~ 75 % RH

860 hPa BIS 1060 hPa

Lagern und transportieren Zustand:

0-40°C

<= 80 % RH

860 hPa BIS 1060 hPa

Vielen Dank für das Reflextherapiegerät und für das Vertrauen in unser Unternehmen. Für jedes unserer Produkte gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum, sofern die in der Produktanleitung angegebenen Anforderungen erfüllt sind.

In jedem Fall empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren, um die Garantie * zu aktivieren. Unsere Garantie gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Produkt repariert wird, wenn etwas schief geht.

TECHNISCHER UNTERSTÜTZUNGSDIENST - OSITO

Das Reflextherapiegerät hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Solange die Kaufrechnung aufbewahrt und versandt wird, befindet sich das Produkt in einwandfreiem Zustand und wird ordnungsgemäß verwendet, wie in diesem Handbuch angegeben. Anleitung.

Die Garantie gilt nicht für:

- Wenn das Produkt über seine Kapazität oder Nützlichkeit hinaus verwendet, missbraucht, geschlagen, Feuchtigkeit ausgesetzt, mit einer flüssigen oder ätzenden Substanz behandelt oder für einen anderen dem Verbraucher zurechenbaren Mangel behandelt wurde.
- Wenn das Produkt von Personen zerlegt, modifiziert oder repariert wurde, die nicht vom offiziellen OSITO autorisiert wurden.
- Wenn der Vorfall durch normalen Verschleiß der Teile aufgrund der Verwendung verursacht wird.

Wenn Sie bei einem Anlass ein Problem mit dem Produkt feststellen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den offiziellen technischen Support und senden Sie die Kaufrechnung für das Produkt per E-Mail:

E-Mail: osito_service@163.com

E-Mail: szaosto006@163.com

Sie können das Handbuch herunterladen und das Betriebsvideo auf unserer Website ansehen.

Offizielle Website: <http://www.szosto.com/product.html>

Sehen Sie sich das Video an: <http://www.szosto.com/product.html>

Laden Sie das Handbuch herunter: <http://www.szosto.com/download.html>