

Gracias por elegir el DISPOSITIVO DE REFLEXOTERAPIA OSITO. Por favor, lea atentamente este manual y aprenda a usar correctamente el Dispositivo antes de utilizarlo. Preste especial atención a las indicaciones de seguridad y conserve este manual para consultas futuras.

INTRODUCCIÓN

- El sistema central de este dispositivo con luz infrarroja, es la reflexoterapia.
- El método de reflexoterapia está basado en la emisión de una serie de pequeños impulsos eléctricos que ayudan a activar su circulación. No tiene ningún efecto contradictorio, es totalmente seguro.
- Este dispositivo ha sido diseñado con radiación infrarroja basándonos en la ciencia moderna y la medicina tradicional china. Está caracterizado por una alta frecuencia, magnetismo y tratamiento calórico.
- Posee 25 programas diferentes para las distintas partes del cuerpo. Todas sus funciones pueden ser seleccionadas desde el control remoto.
- Además puede completar el tratamiento con los electrodos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para prevenir daños físicos y materiales asegúrese de utilizar apropiadamente el producto, tal y como se explica en este manual.

APLICACIONES

- Nunca utilice el Dispositivo en lugares húmedos o con alta acumulación de polvo, puede ocasionar un mal funcionamiento mecánico.
- No coloque el Dispositivo cerca de fuentes de calor o bajo la luz del sol.
- Nunca use este aparato si está durmiendo o para dormirse.

USUARIOS NO APTOS

Debe consultar a su médico antes de utilizar el Dispositivo de Reflexoterapia si se encuentra en una de las siguientes situaciones:

- Está embarazada.
- Tiene fiebre.
- El médico le ha recomendado reposo o no se siente bien. Está en periodo de convalecencia prescrito por el médico.
- Padece una enfermedad crónica o cáncer. español
- Posee lesiones cerebrales (coágulos, laceraciones, traumatismos, etc.)
- Se está recuperando de una operación en la parte superior del cuerpo, las nalgas, los muslos o las pantorrillas.
- Sufre una enfermedad cardíaca, problemas de corazón o depende de un dispositivo médico electrónico.
- No utilizar si lleva un marcapasos.
- Está herido o padece una enfermedad cutánea.
- Si tiene algún hueso fracturado o posee alguna malformación de éstos.
- Este aparato no es apto para niños, personas discapacitadas o inválidas.
- No se recomienda su uso a personas con problemas psíquicos.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

- Coloque el Dispositivo de Reflexoterapia en una superficie plana.
- No utilice el dispositivo junto con otros equipos terapéuticos o aparatos médicos eléctricos y similares.
- No se siente sobre el Dispositivo, podría romperse, o ésta podría causarle algún tipo de daño.
- Por favor, no ingiera ningún líquido cuando esté utilizando el dispositivo, evite derramar cualquier líquido sobre el dispositivo.

- No use el dispositivo sobre partes del cuerpo mojadas, podrían causar un mal funcionamiento del dispositivo o incluso una descarga eléctrica.

- Mantenga su cuerpo relajado durante el tratamiento.

- **No use el dispositivo sobre partes del cuerpo mojadas, podrían causar un mal funcionamiento del dispositivo o incluso una descarga eléctrica.**

- **Mantenga su cuerpo relajado durante el tratamiento.**

USO DE LOS ELECTRODOS

- El uso de los electrodos está permitido únicamente en brazos, piernas, abdomen y espalda. El resto del cuerpo se tratará mediante la reflexoterapia.

- No pegue dos electrodos juntos.

- Para proteger el buen funcionamiento del electrodo, ponga el protector de nuevo en el gel del electrodo después de cada uso.

- Mantenga el gel de los electrodos limpios, no deje que sean expuestos a altas temperaturas y a la luz solar.

- Si el gel del electrodo no es lo suficientemente adhesivo debido a la suciedad, límpielo con un paño húmedo o bien adquiera unos nuevos contactando con el servicio de asistencia técnica.

- No limpie los electrodos con ningún producto químico.

NO DEBE UTILIZAR EL DISPOSITIVO EN LAS SIGUIENTES OCASIONES

- Si se ha caído en el agua: no coloque, ni deje caer agua u otros líquidos.

- Si siente sensaciones extrañas o serias molestias durante el funcionamiento, pare inmediatamente el aparato y consulte a su médico.

- Si hay tormenta eléctrica.


- Si tiene un cable o enchufe dañado o no funciona correctamente.

USO CORRECTO DEL ENCHUFE

- Compruebe que el voltaje es el adecuado.

- Nunca tire directamente del cable. Cuando desenchufe el aparato, tire del enchufe, no del cable.

ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO

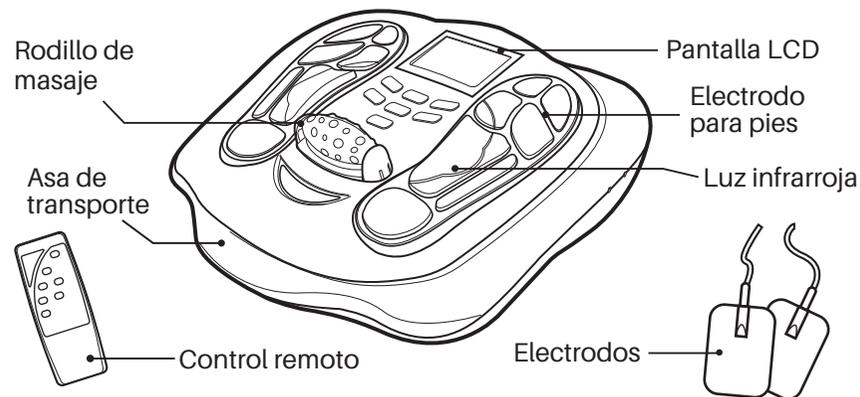

GUÍA OPERATIVA DEL DISPOSITIVO

1. Sitúe el dispositivo sobre una superficie plana y enchúfelo. La luz roja se encenderá y apagará.
2. Ponga los pies descalzos sobre el dispositivo. Para que empiece a funcionar correctamente, es importante que apoye los dos pies.
3. Presione ON/OFF durante unos segundos, la pantalla LCD se encenderá.
4. Presione el botón MODO y seleccione el programa que desea, a elegir entre 25 programas.
5. Para incrementar la intensidad de los impulsos, tan sólo tiene que presionar ▲ SOLE o BODY, si desea reducir la intensidad de los impulsos presione SOLE o BODY ▼.
6. Puede elegir el programa que más se ajuste a sus necesidades. No es aconsejable cambiar el programa cuando está en funcionamiento, si lo hace, la intensidad se ajustará al nivel 0 para que la ajuste como desee.
7. Para apagar el dispositivo, presione el botón ON/OFF durante 3 segundos y éste se apagará inmediatamente.

AVISO: Aumente la intensidad del dispositivo progresivamente hasta que note los impulsos. El nivel de intensidad adecuado dependerá de la sensibilidad de cada persona. Es importante que ponga los dos pies descalzos (sin calcetines).

• Programas de Reflexoterapia

A continuación, le mostramos una tabla de referencia en la que quedan descritos los 25 programas del dispositivo. Los programas adjuntos tan sólo mitigan y ayudan en los temas descritos a continuación.

Es aconsejable no interrumpir o cambiar un programa a mitad de tratamiento para que tenga más efecto.


Descripción de los modos

Modo	Tipo	Síntomas Correspondientes
1. Empujar la acupuntura	TENS	Tensión
2. Acupuntura	TENS	Dolor de cabeza
3. Amasamiento de acupuntura	TENS	Menoxenia
4. Tapping de acupuntura	TENS	Presión lumbar
5. Desguace	TENS	Pies cansados
6. Apretando	EMS	Ciática
7. Masaje	EMS	Sistema inmunológico
8. Masaje de empuje	EMS	Lumbago
9. Empujar Apretar	TENS	Relajación músculos
10. Exprimiendo Acupuntura	TENS	Activación músculos
11. Martillo de acupuntura	TENS	Dolor de cuello
12. Amasadura	EMS	Dolor de pecho
13. Descomunal	TENS	Apoplejía
14. Raspar	TENS	Estreñimiento
15. Utilización de tazas	EMS	Dolor de estómago
16. Darle forma al cuerpo	EMS	Adelgazamiento
17. Martilleo	EMS	Insomnio
18. Masaje Tapping	TENS	Fatiga
19. Empujar	EMS	Dolor de vértebras
20. Golpeteo rodante	EMS	Neurastenia
21. Apretando	EMS	Osteoporosis
22. Cebiar	TENS	Espondilosis cervical
23. Masaje de terapia de acupuntura	TENS	Artritis y reumatismo
24. Shiatsu	TENS	Circulación sanguínea
25. Amasado de laminación	EMS	Estrés

• Mapa del pie en relación con las dolencias corporales.

La Reflexoterapia es una ciencia que atiende a una de las zonas más sensibles del cuerpo humano, los pies. Consiste en la activación de ciertos puntos, que determinan la conexión de los órganos humanos a través de la planta del pie.

Véase, a continuación, un mapa del pie donde se muestra la relación de los órganos del cuerpo y dolencias con éste.

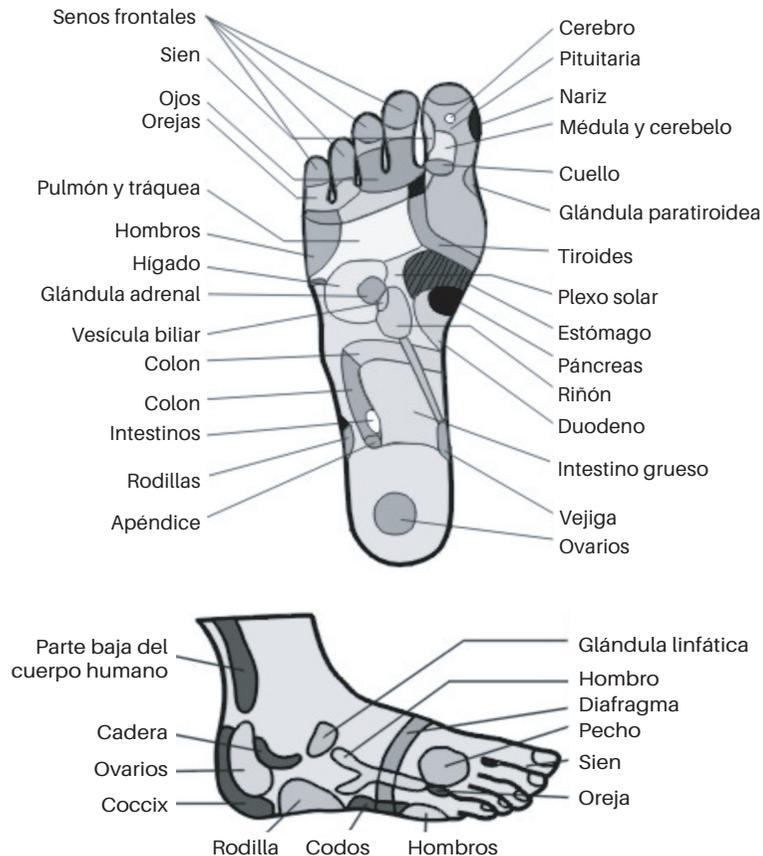

• Uso de electrodos

El Dispositivo de Reflexoterapia incluye electrodos de gel para activar o relajar los músculos. La estimulación muscular a través de electrodos es una técnica utilizada para tonificar, remodelar, reafirmar y mantener la definición muscular.

1. Conecte los electrodos al dispositivo principal.
2. Coloque los electrodos en la zona que desea tratar (brazos, piernas, espalda o abdomen).
3. Elija el programa en función de su objetivo: Programa 9 (relajación muscular) o Programa 10 (activación muscular).
4. Vaya aumentando la intensidad progresivamente hasta que note los impulsos (el nivel de intensidad puede variar en función de la sensibilidad de cada persona).



IMPORTANTE:

- No utilizar al mismo tiempo que los programas Reflexoterapia.
- El uso de éstos electrodos únicamente está permitido en brazos, piernas, abdomen y espalda. El resto del cuerpo se debe tratar en otro momento, mediante la reflexoterapia, apoyando los pies descalzos en el dispositivo.
- No coloque los electrodos en zonas o músculos dañados.

Esempio di utilizzo della terapia con elettrodi



Hombros y espalda

Los síntomas (hombros, espalda dolor muscular y así sucesivamente)

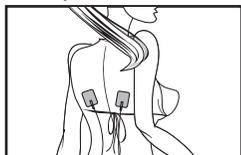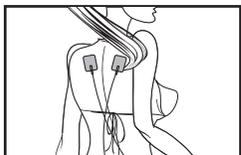



Cintura

Los síntomas (dolor muscular de la cintura y así sucesivamente)

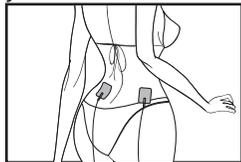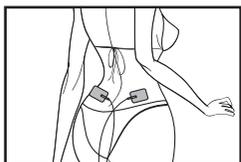



Brazos

Los síntomas (adormecer el brazo, dolor muscular y así sucesivamente)

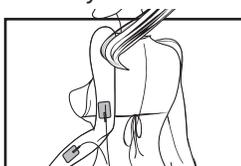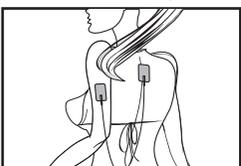

Piernas

Los síntomas (dolor muscular de la pierna y así sucesivamente)

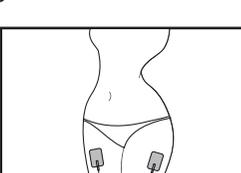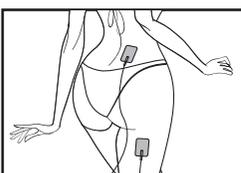

Nota: Si necesita adquirir repuestos de estos accesorios, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial.

MANTENIMIENTO

- Cuando acabe de utilizar el dispositivo, por favor, desconecte el cable del enchufe.
- Antes de limpiar el Dispositivo, asegúrese de que está desconectado.
- Si aparece alguna mancha de aceite, por favor, proceda a su limpieza con algún trapo y limpiador.
- No limpie el interruptor y el mando a distancia con paños húmedos, podría causar efectos irreversibles en el funcionamiento del dispositivo.
- No limpie el dispositivo con cepillos o materiales duros que puedan dañarlo.

SUGERENCIAS

- Para que el dispositivo funcione correctamente, debe colocar los dos pies descalzos, sin calcetines, sobre la base del dispositivo; de lo contrario, el aparato no funcionará.
- Si su dispositivo no funciona después de haber sido encendido, asegúrese de que está bien conectado, revise el cable que va del dispositivo al enchufe; apague y encienda el dispositivo de nuevo.
- Si se detiene de repente, revise que no haya acabado el tiempo; empiece de nuevo el uso del Dispositivo de reflexoterapia.
- No utilice el Dispositivo de reflexoterapia más de 25 minutos al día.
- El uso de electrodos está pensado para activar la musculatura en brazos, piernas, espalda y abdomen, no los coloque en otras zonas del cuerpo no especificadas en este manual. Para tratar el resto del cuerpo existen programas específicos mediante la reflexoterapia (situando los pies descalzos sobre el dispositivo).

Especificaciones técnicas

Explicación de las figuras, los símbolos, las declaraciones de advertencia y las abreviaturas en el equipo

1		(Símbolo de "código de lote". Este símbolo debe ser con lote de producción no y junto al gráfico, código de lote y el número de lote y el número de lote, etc.) Ejemplos:  ABC123
2		(Símbolo de "Fecha de fabricación". Este símbolo debe estar junto al número) Fecha de fabricación de equipos médicos (utilice la marca  delante de la fecha de fabricación)
3		Símbolo de "ATENCIÓN: CONSULTE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS"
4		Después de la aprobación de la certificación CE, marca CE, como seguido, dibujado. Su altura vertical no deberá ser inferior a 5mm, claramente visible, clara y duradera, los procedimientos de evaluación de la conformidad CE son realizados por un organismo notificado, el organismo notificado número de registro debe estar del lado de la marca CE (generalmente en la parte inferior derecha). El diámetro del marcado CE no deberá ser inferior a los 5mm en semicírculo de las dos marcas, el XXXX en la esquina inferior derecha es el número de identificación del organismo notificado, tales como su-0413. Todos los medicamentos vendidos en el mercado de la UE deben tener el marcado "CE". Colocar la marca CE indica que: A. El equipo para satisfacer las necesidades básicas de los MDD; B. El equipo dentro de la UE pueden ser vendidos legalmente en el mercado. C. El dispositivo ha pasado los procedimientos de evaluación de la conformidad. El marcado CE colocado en los dispositivos médicos tienen dos tipos. Es decir, marca CE sin número de identificación del organismo notificado y la marca CE con número de identificación del organismo notificado.

5		El símbolo para el fabricante (con la etiqueta "Fabricante"), la etiqueta debe contener el nombre de la empresa y la dirección del fabricante. Los fabricantes de productos, CE representan el nombre y domicilio de los importadores y/o distribuidores.
6		Símbolo de "representante autorizado en la Comunidad Europea" ("Representante Autorizado" tag), la etiqueta debe incluir el nombre de la compañía y la dirección de la empresa autorizada por la Unión Europea.
7		Los productos de desecho debe ser manejado de manera legal.
8		Dispositivos BF
9		Boca
10		Frágil
11		Manténgase seco
12		Apilar
13	SN	Número de serie de dispositivos
14	IP21	Protegido del tacto con los dedos y objetos de más de 12 milímetros y protegido de la pulverización de agua a menos de 15 grados de la vertical

Almacenamiento / Mantenimiento

1. Utilice un paño húmedo o limpiador neutro para limpiar la máquina, y no use líquido volátil para limpiar la máquina, tales como benceno, disolvente o gasolina.
2. Manténgalo alejado del campo magnético y del alcance de los niños.
3. Mantenga la máquina lejos de alta temperatura, humedad, luz solar directa o rociar agua.
4. Si los electrodos no están suficientemente adherente o sucia, límpiela con un paño húmedo o cambiar por otras nuevas. No limpiar los electrodos con productos químicos.
5. Por favor no manto, reparar o reconstruir la máquina usted mismo, o el fabricante no garantiza la reparación y servicios post-venta.
6. Si no se utiliza durante un largo período de tiempo, quite las pilas del mando a distancia

La protección del medio ambiente

Por favor, hacer una clasificación de basura después de su uso, tales como electrodos, caja de cartón y así sucesivamente.

Especificaciones

Número de modelo: AST-300D

Este equipo pertenece a la clase de tipo BF II conforme a la cláusula 5.



Shenzhen OSTO Technology Company Limited
No.43, Longfeng road, Xinsheng community,
Longgang street, Longgang district,
Shenzhen city, Guangdong Province, China



Wellkang Ltd
SuiteB,29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom

Clasificación: 5 V CC, 1000 mA

Powered by adaptador: WT0502400

Tensión nominal: 100-240 V

Potencia de entrada nominal: 0,1 A

Forma de onda de salida: onda cuadrada

Frecuencia de repetición del pulso: 10-100 Hz

Amplitud máxima de tensión de salida: 72V

Versión de software no:MC0188F-REV-V1.0

Condición de funcionamiento:

10-40°C

30%RH~75%RH

860hPa a 1060hPa

Almacenar y transportar el estado:

0-40°C

<=80%RH

860hPa a 1060hPa

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Salida nominal: 5v 1000mA

Duración del pulso: 115 µS

Efecto de la impedancia de carga: 1KΩ

Gracias por el Dispositivo de reflexoterapia y haber depositado la confianza en nuestra compañía. Cada uno de nuestros productos tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre que se cumplan los requisitos citados en el manual de instrucciones del producto.

En cualquier caso, le recomendamos que registre su producto para activar la garantía*. Nuestra garantía le da la tranquilidad de que su producto será reparado en caso de que tenga algún problema.

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA - OSITO

El Dispositivo de Reflexoterapia, tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se de un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, tratado con algún líquido o sustancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el OSITO oficial.
- Si la incidencia es originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.
- El costo de los portes de la recogida del producto ni de la entrega.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe contactar con su distribuidor o con el Servicio de Asistencia Técnica oficial y hacer llegar la factura de compra del producto vía e-mail:

E-mail: osito_service@163.com

E-mail: szaosto006@163.com

Puede descargar el manual y ver el video de operación en nuestro sitio web.

Sitio web oficial: <http://www.szosto.com/product.html>

Vea el video: <http://www.szosto.com/product.html>

Descargar manual: <http://www.szosto.com/download.html>